

バーニングシェイパー

BR-5100

取扱説明書(保証書付)



Contents

安全上のご注意	2
各部位の名称 ・本体/付属品 ・表示について	8
ご使用の前に ・充電方法 ・粘着パッドの準備 ・粘着パッドの貼り付け	10
使用方法	14
使い終わったら	17
電池交換/ 保管・廃棄について	18
お手入れ方法/ 保守・点検について	19
こんな時は	20
アフターサービス	22
製品仕様	23
消耗品について	23
保証規定・保証書	24

このたびは「バーニングシェイパー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。




安全上のご注意

※必ずお守りください



ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項はご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示に区分して説明しています。


 危険	「使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。
 注意	「使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容」です。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

お守りいただく内容を、次の記号で説明しています。

	禁止の行為であることの内容です。
	行為を強制、または指示する内容です。


ご使用に関して

 **危険**

 ●危険防止のため、次の人は絶対に使用しない。

- 身体が自由がきかない人
- 乳幼児
- 睡眠薬を服用した人
- 酩酊状態の人
- 知覚障害のある人
- 意思表示のできない人
- 温度感覚喪失が認められる人

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

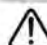
危険


●危険防止のため、次の人は使用しない。医用電気機器の誤作動を招く恐れ、または事故や肌、身体のトラブルを生じる恐れがあります。

- 医用電気機器を使用している人
(ペースメーカーなど体内植込み型医用電気機器、人口心肺など生命維持用医用電気機器、心電計などの装着形医用電気機器)
- 妊娠中、出産直後の人
- 高血圧の人
- 不整脈の人
- 睡眠時無呼吸症の人
- ぜんそくの人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 適正部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人
- 熱の高い人
- 安静を必要とする人
- 急性疾患のある人
- 疼痛性疾患のある人
- 貧血ぎみの人
- 血行障害や血圧に異常のある人
- 生理中の人
- 医師から運動を禁じられている人
- 上記以外に身体に異常、不安を感じている人

なお、疑問のある時は、医師の指導を受けてから使用してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。

●危険防止のため、下記医用電気機器、家庭用治療器との併用、及び同時使用は、機器に誤作動を招く恐れがあるので使用しない。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- 人口心肺等の生命維持用医用電気機器
- 心電計等の装着形医用電気機器

これらの医用電気機器の誤動作を招き、生命に著しい障害や体調不良をもたらす原因になります。

●濡れた手で本体やACアダプターにさわらない。

感電や事故、故障、発熱、火災の原因になります。


警告


●次の部位に使用しない。

頭部、顔、口、耳及び耳の周辺、首、のどぼとけ、頸動脈（咽喉部）、整形をされた部位、ニキビの上、リンパの上、デコルテ、身体の内部（粘膜など）、陰部、骨のすぐ上（くるぶし、ひざ、ひじ、他に皮膚が薄い部分）、心臓の上や周辺および前後。

事故や体調不良、身体のトラブルを起こす恐れがあります。

 **警告**



● 次のような方は使用しない。

急性疾患、結核性疾患、有熱性疾患、伝染病疾患、心臓疾患、血液疾患、血圧異常時、悪性腫瘍、切り傷、体調がすぐれない場合、飲酒や眠気をさそう薬を服用中の人、疲労の激しい人。

事故や体調不良、身体のトラブルを起こす恐れがあります。また、通院中の人やご自身で判断ができない人は、使用前に医師にご相談ください。

● 本来の目的以外には使用しない。またペットには使用しない。

故障や事故、ケガ、トラブルの原因になります。

● 自動車の運転中や危険をとまなう作業中は使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

● 子供には使用させない。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

● 本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。



● 粘着パッドは、金属製のもの（ネックレス、ベルト、時計など）と重なったり、触れたりしないように貼る。

強い刺激を受けることがあります。

● 粘着パッドは、互いに重ならないように貼る。

● 使用する前には、必ず本製品が正常かつ安全に作動することを確認する。また、操作ボタンやタイマー、表示部が正常に作動するか確認する。

感電や事故、故障の原因になります。

● 本製品を使用する際は、粘着パッドを使用したい部位に貼り付けてから、操作手順に従って行う。

本体が動作中に粘着パッドを肌に貼り付けると、強い刺激を受ける場合があります。


● 本製品を使用する前には、取扱説明書に記載してある使用方法を必ず読み、適正な使用方法で行う。

● 体調が悪い時は使用しない。

● 使用開始当初は出力を弱めに、また時間を短めに設定する。

刺激感覚には個人差があり、また部位によっても感じ方に差があります。急に出力を上げないように、少しずつ身体を慣らしながら出力を上げてください。

使用場所について

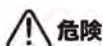

危険



- 浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしない。また、水やお湯に水没させない。

感電や事故、故障、発熱、火災の原因になります。



警告

- 台所、トイレ、車の中、火気の近く、屋外、バルコニー、高温多湿、直射日光のあたる場所で使用、保管はしない。

感電や事故、故障の原因になります。

電源(専用ACアダプター)・配線について



危険



- コンセントに接続する場合は必ず守る。

- 必ず交流100Vで使用する。

- コンセントの接続は、タコ足配線にしない。

感電や事故、故障、発熱、火災の原因になります。



警告



- 専用ACアダプター以外は使用しない。

事故、故障の原因になります。

- 専用ACアダプターの電源プラグにゴミやほこりなどを付着させたまま使用しない。

発火、ショートの原因になります。

- 専用ACアダプターの差込プラグ(金属部分)を手で触らない。

汚れによる接触不良により、事故や故障の原因になります。

- 専用ACアダプターのコードを無理に引っ張らない。

感電や事故、故障の原因になります。

- 使用しない時は、必ず専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く(充電時を除く)。


ほこりがたまり、火災の恐れがあります。

- 専用ACアダプターを布や毛布等で覆って使用しない。

 警告

- 専用ACアダプターはコンセントに確実に差し込む。また、専用ACアダプターが破損したり、差し込みがゆるい場合は使用しない。
感電、ショート、発火の原因になります。

充電機について

 警告


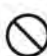
- 専用ニッケル水素充電機以外は絶対に使用しない。
感電や発火、事故、故障の原因になります。
- 専用ニッケル水素充電機は、火の中に入れてたり、加温したり、分解したり、赤黒のリード線を剥いたり、ショートさせたりしない。
感電や事故、故障、発熱、火災の原因になります。
- 専用ACアダプターの差込プラグ、接続コードプラグ、専用ニッケル水素充電機が容易に離脱しないように本体に正しくセットし、本体の指定差込口以外には差し込まない。
感電や事故、故障、発熱、火災の原因になります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、充電機を本体から外して保管する。
- 寿命になった専用ニッケル水素充電機を廃棄する時は、地域で定める条例に従う。

使用中のご注意

 警告


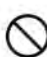
- 粘着パッドは正しく装着する。
感電、やけどや事故、故障の原因になります。
- 本製品や身体に異常を感じたら、すぐに使用を中止し電源を切る。
事故や体調不調を起こす恐れがあります。
- 本製品の使用により発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合には、すぐに使用を中止する。
体調不調を起こす恐れがあります。
- 同じ粘着パッドを何人かで使いまわさない。
感染症になる可能性があります。

 警告

-  ●粘着パッドや接続コードの破損、断線などがある時は、使用を中止して別売品を用意する。
感電や事故、故障の原因になります。
-  ●指定されている使用方法以外には絶対に使用しない。
事故やトラブルの原因になります。



故障を防ぐために

 警告

-  ●本体を勝手に分解・改造・修理しない。
感電、やけどや事故、故障の原因になります。
分解禁止
-  ●落としたり踏んだりなどの強い衝撃を機器に与えない。
感電や事故、故障の原因になります。

お手入れと保管

 警告

-  ●温度、湿度の高いところ、ほこりの多いところで保管しない。
事故や故障の原因になります。
- 本体のお手入れの時に、シンナー、ベンジン、アルコール、酸性洗剤、漂白剤などは使用しない。
-  ●子供の手の届かないところに保管する。
事故やトラブルの原因になります。
- 汚れを取る時は、必ず電源を切った状態で、乾いた布か、水または中性洗剤をしみこませ固く絞った布で拭く。
感電や事故、故障の原因になります。
- お手入れをする時は、電源を切り、専用ACアダプターのコンセントを抜いてから行う。

各部位の名称


本体

※完成品でお届けするため、
組み立ての必要はありません。

各部位の名称



付属品

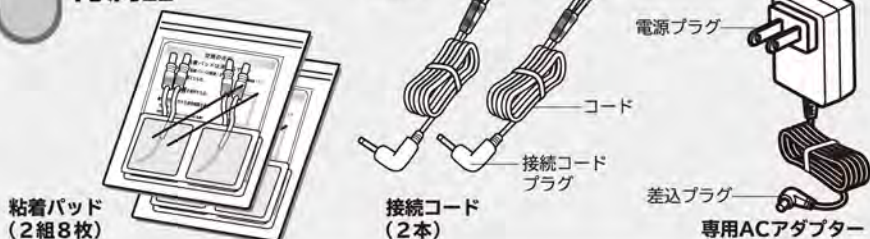

表示について

エラー表示

専用ACアダプター、専用ニッケル水素充電電池が故障した時にエラーを表示して出力を停止します。

出力の強さ表示

強さ：0～30

タイマー表示

残り時間を表示します。

ステップ表示

現在どのステップを実行しているかを表示します。

- ①ステップ1
- ②ステップ2
- ③ステップ3
- ④ステップ4

ボディシェイプモード表示

コアシェイプモード表示

ダブルシェイプモード表示

ロック表示


ロック機能を使用中に表示します。


電池残量表示

充電電池の残量を表示します。


出力レベル表示

出力の強さを表示します。

 炎1つ点灯
出力：1～10

 炎2つ点灯
出力：11～20

 炎3つ点灯
出力：21～30

 炎が点滅
ハイパワーモード機能使用中に表示します。



各部位の名称



注意 不明な表示が出た場合は使用をとりやめ、P.22を参照してください。



専用ニッケル水素充電電池
※お届け時は、本体に内蔵されています。



取扱説明書



かんたん利用ガイド



注意

開梱時、すべての付属品が揃っているかご確認ください。

充電方法


- はじめてお使いになる時は、充電してからお使いください。

※専用ニッケル水素充電電池は出荷時に本体内にセットされています。

- ①専用ACアダプターの差込プラグを本体に差し込みます。



- ②専用ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

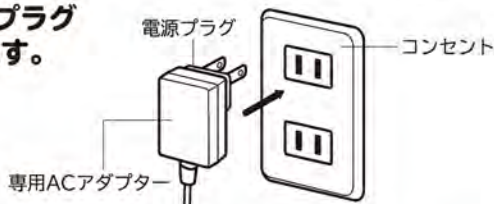

- ③充電中は、電池残量表示が点滅し、充電が完了すると、点灯に変わります。電源を入れずに充電をする場合、充電が完了すると、画面表示はすべて消灯します。




充電電池表示は、右記の順に減っていきます。



- 充電時間は、最大で約7時間です。満充電になる前に途中で充電を止めると、充電電池の寿命が短くなることがあります。
- 充電電池の残量がなくなってから充電することをおすすめします。
- 充電中に本体が熱くなりますが、故障ではありません。
- 充電電池の残量がなくなると、「0(残量なし)」が30秒間点灯した後、画面表示はすべて消灯します。
- 満充電の場合でも、使用部位や出力によって、1時間前後でなくなることがあります。
- 充電しながらでもご使用になれます。
- 使用中に電池残量表示が増えたり減ったりしますが、故障ではありません。

粘着パッドの準備

① 粘着パッドに接続コードを差し込みます。

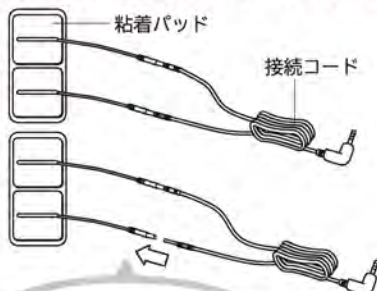

接続コードの接続ピンを粘着パッドに差し込みます。

⚠ 注意

- 本体の電源が入っていないことを確認し、奥までしっかり差し込んでください。
- 接続コードプラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。
- 接続コードプラグのコードを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。
- 接続コードは消耗品です。コードの断線など故障をした場合は、すぐに使用を中止して別売品をお買い求めください。
- 接続ピンが細いので、怪我をしない様にご注意ください。


② 本体に接続コードを差し込みます。



⚠ 注意

- はがした後のシートは、ご使用後の粘着パッドの保管にも使用しますので、捨てないでください。
- 粘着パッドをシートからはがす時は、粘着パッドの端を掴まんでゆっくり持ち上げてください。接続コード部分を持ってはがさないでください。

③ 粘着パッドをはがします。

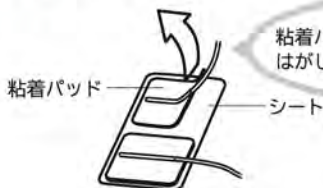

粘着パッドをシートより一つずつはがし、肌にはりつけます。

シートは粘着パッドの保管時に必要ですので捨てないでください。

● 粘着パッドの取扱いについて









- 粘着パッドの粘着面同士を貼り付けないでください。
- 汚れか、乾燥により粘着パッドの粘着力が弱まった場合は、新しいものと交換してください。
- 粘着パッドを濡らしてしまった場合は、すぐに水分を拭き取り、よく乾かしてください。
※粘着パッドが膨らんでしまった場合は、新しいものと交換してください。
- 接続コード部分が汚れた場合は、水または消毒用アルコールを少量含ませた布で軽くふき取るようにしてください。
※シンナー、ベンジン、洗剤は使用しないでください。(本製品は防水ではありません)

- 粘着パッドの保管方法は、P18をご参照ください。








粘着パッドの貼り付け例

下図は効果的な貼り付け例です。P3の警告、P13の禁止をお守

④ 使用する部位に貼り付けます。貼り付け位置により刺激の感じ方が多少異なることがあります。

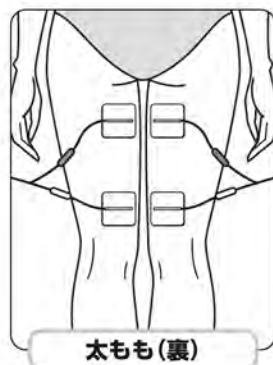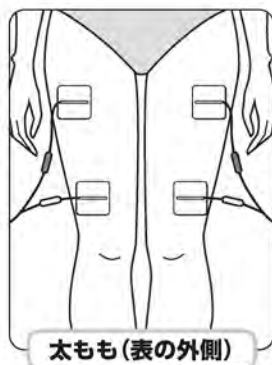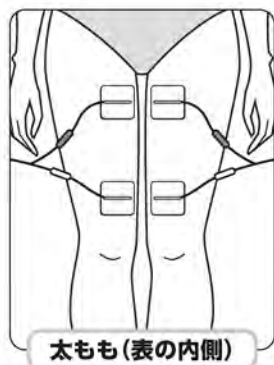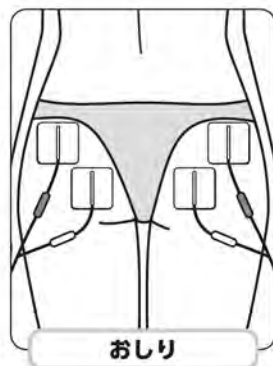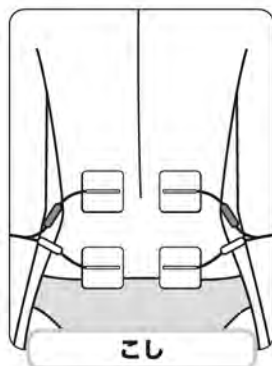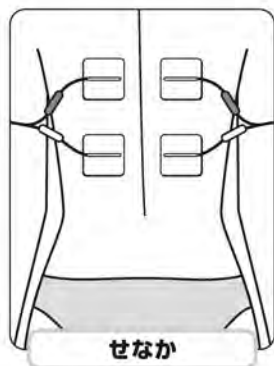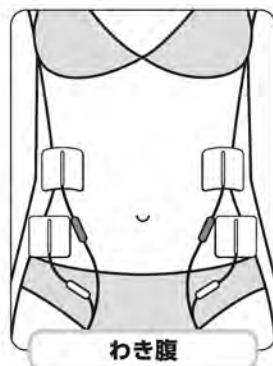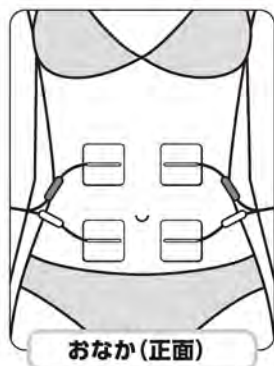

りの上、お好みの部位に貼り付けてください。

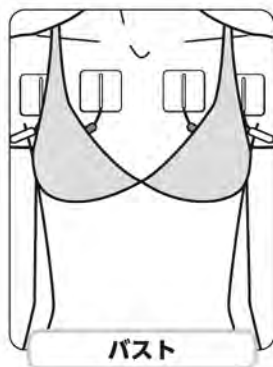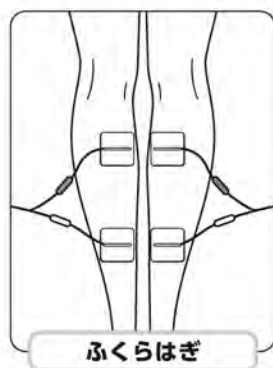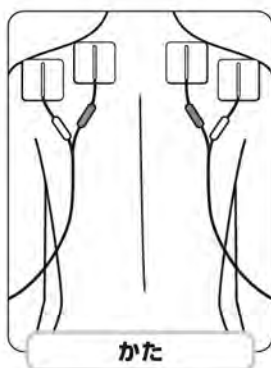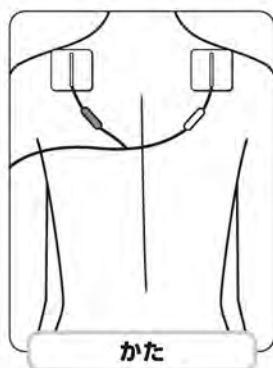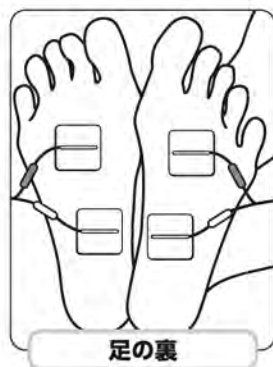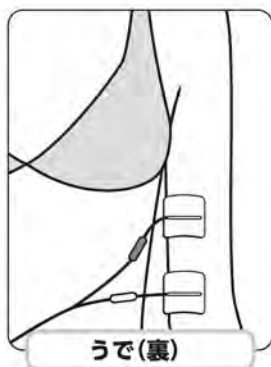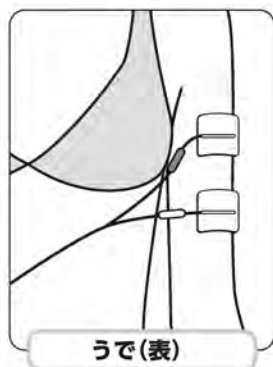

禁止

心臓の上や心臓を挟み込むように粘着パッドを貼らないでください。

注意


- 1極 (1対) でもご使用できますが、その際はもう1極の接続コードプラグを抜いてご使用ください。
- お肌に水滴がない状態でご使用ください。
- 粘着パッドは必ず各部位のお肌に貼り付けてください。
- 使用時間の目安は各部位1回15分から30分となります。同じ部位への連続使用はしないでください。

ご使用前に

使用方法

注意 粘着パッドをセットし、使用する部位に貼り付けてから操作してください。

1 電源ボタンを長押し(1秒以上)し、電源を入れます。

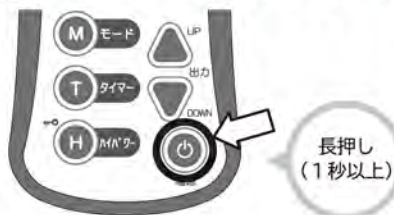


注意

- 不明な表示が出た場合は、電源ボタンを長押しして電源を切り、すぐに使用を中止してください。
- ご使用中に違和感を感じた時は、電源ボタンを長押しして電源を切り、すぐに使用を中止してください。

2 モードボタンを押し、好みのモードを選択します。

- ボタンを押すたびにモードが変わり、好みのモードが選べます。

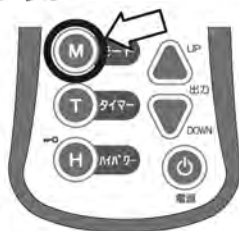

- 選択された各モードのアイコンの周囲が点灯します。

例) ボディシェイプモードを選択した場合



文字の周囲の枠が点灯します。

- ※初めて電源を入れた時はボディシェイプモードが選択されます。
2回目以降は、前回使用したモードが最初に選択されます。

各モードの違いはP15をご覧ください。

③ タイマーボタンを押し、15分か30分のいずれかを選びます。

- タイマーボタンを押すたびに15分、30分が表示されるので、使いたい時間を選びます。




タイマー 15分 タイマー 30分

[最初]
15分

[1回押す]
30分

[2回押す]
15分

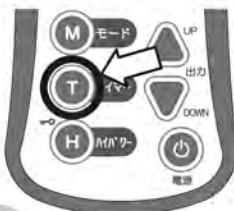

- 各モード、それぞれ15分間を3~4ステップにわけたプログラムで構成されています。時間経過によりステップ表示が切り替わります。



ポディーシェイプ

3ステップ
各5分

3,800Hzの周波数で段々間隔が短くなり、ドンドンと叩かれているような刺激です。



コアシェイプ

3ステップ
各5分

4,200Hzの周波数で段々間隔が長くなり、ぐーっと押されているような刺激です。



ダブルシェイプ

4ステップ
各3分45秒

3,800Hzと4,200Hzの周波数を交互に出力します。段々間隔が長くなり、しっかり押されているような刺激です。

- 30分を選択した場合は、15分のプログラムを2回繰り返します。
- タイマー時間の変更は、出力開始前に行ってください。出力中は変更できません。
- 次回使用時は、前回使用したタイマー時間が表示されます。
- タイマー表示が1分以上の時に、出力ダウンボタンを押し出力を0にすると、タイマー時間は停止します。
- 残時間が0になった時は、タイマー表示が点滅します。この状態で3分間ボタン操作を行わないと自動で電源が切れます。

④ 出力を調整します。

- 出力アップボタン、出力ダウンボタンを押し、お好みの強さにセットします。(1~30段階で調節できます。)

出力：1~10



炎1つ点灯

出力：11~20




炎2つ点灯

出力：21~30



炎3つ点灯

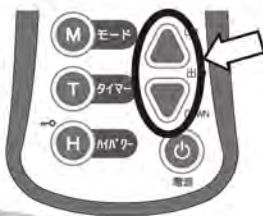


最初は低いレベルから始め、徐々にお好みの強さまで上げてご使用ください。

5 便利な機能(お好みに合わせて、使用中に以下の機能が利用できます。)

●キーロック

誤操作を防止したい時にご使用ください。

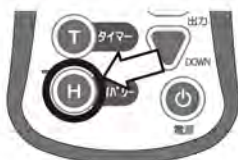

- ①出力中にハイパワーボタンを長押し(1秒以上)するとロックされ、ボタン操作が無効になります。また、キーロック中は、キーロック表示が点灯します。
- ②再度ハイパワーボタンを長押し(1秒以上)すると、ロック機能が解除されます。

- キーロック中は電源ボタンによる電源の入切のみ作動します。
- 電源を切るとキーロックは解除されます。


●ハイパワーモード

パワーと速度が瞬時に20%アップするので、より短時間でトレーニングしたい方や、普通の出力では物足りない方にお勧めです。



出力中にハイパワーボタンを押すとハイパワーモードになり、炎の表示が点滅します。


例) 出力15の時にハイパワーボタンを押す

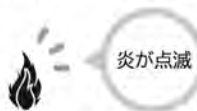

- ハイパワーモード中でも出力の変更は可能です。
- ハイパワーモード中に出力を変更した場合は、通常時の出力にも変更が反映されます。

6 終了する時

電源ボタンを長押し(1秒以上)し、電源を切ります。

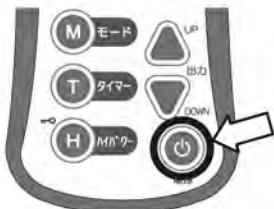


- 出力0の状態でも3分以上操作を行わないと、自動的に電源が切れます。
- 出力中にモードを切り替えると、出力は0になります。


使い終わったら

使い終わったら

- ① 電源ボタンを長押しし、電源を切る。
(充電中の充電マーク以外は、液晶画面がすべて消灯します。)

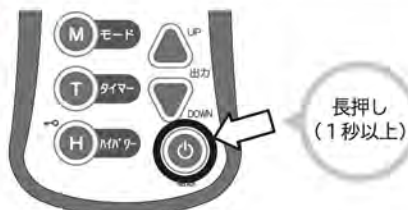


- ② 粘着パッドをはがす。

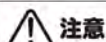


注意

- 粘着パッドを身体からはがす時は、粘着パッドの端を掴んでゆっくり持ち上げてください。接続コード部分を持ってはがさないでください。

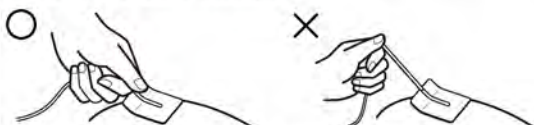

- ③ 汚れをとってから、透明シートに貼る。

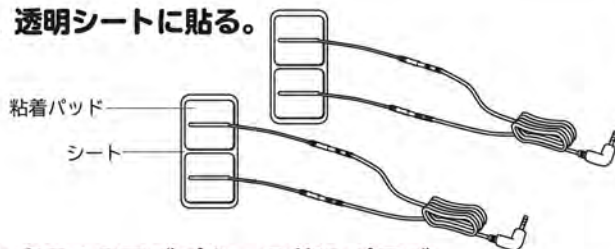

- ④ 接続コードプラグと専用ACアダプターの差込プラグ、電源プラグを外す。



専用ACアダプターを接続して使用した場合は、電源が切れていることを確認の上、差込プラグと電源プラグを外してください。

電池交換について

●電池交換方法

① 背面の電池フタを開く。



軽く押さえながら引き下げます。


② 古い専用ニッケル水素充電電池を外す。



③ 新しい専用ニッケル水素充電電池を取りつけて電池フタを閉じる。



コネクタの向きに注意

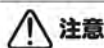

注意

- 必ず専用ACアダプターを本体から抜き、電源がオフになっていることをご確認の後、専用ニッケル水素充電電池を交換してください。
- 古い専用ニッケル水素充電電池はお住まいの地域のルールに沿って廃棄してください。

保管・廃棄について

●保管についての注意

- 電源は切った状態で保管してください。
- 長時間使用しない場合は、専用ニッケル水素充電電池を本体から外して保管してください。
- 専用ACアダプター、接続コードの根元に無理な力をかけないでください。
- 小児の手が届かない場所に保管してください。
- 本体、接続コード、専用ACアダプターなどは、次回の使用にさしつかえないように、きれいな状態にした後、整理してまとめて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、高温・多湿・直射日光のあたる場所を避け、風通しのよい清潔な場所に保管してください。

●粘着パッド保管方法

- 粘着パッドは乾燥してくると粘着力が低下します。粘着力が低下してきた場合、1～2滴の水をつけて汚れや脂を取り除くと、長くお使いいただけます。
- 粘着パッドを保管する時は、シートの貼りつけ面に貼ってください。
- 使用後は、粘着パッドを元のシートに貼り付け、袋に入れてチャックを閉め、高温・高湿を避けて保管してください。
- 粘着パッドの袋に使用期限が表示してあります。期限切れの粘着パッドは使用しないでください。
- 粘着パッドは消耗品です。粘着力が低下（1日1か所、約20回程度の使用が標準）しましたら交換してください。

●本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため廃棄する時は、そのまま放置しないで各自自治体の取り決めに従ってください。

お手入れ方法

- 汚れたときは乾いた布か、水または中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
絶対に水洗いしないでください。
- 除光液、化粧落としなどの溶剤、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
- 本製品は防水でないため、絶対に水やお湯には水没させないようにご注意ください。
- 粘着パッドのお手入れについて
 - ・粘着パッドの粘着面同士を貼り付けしないでください。
 - ・汚れか乾燥により粘着パッドの粘着力が弱まった場合は、新しいものと交換してください。
 - ・粘着パッドを濡らしてしまった場合は、すぐに水分を拭き取りよく乾かしてください。
※粘着パッドが膨らんでしまった場合は、新しいものと交換してください。
 - ・粘着パッドが汚れた場合は、新しいものに交換してください。

保守・点検について

●保守・点検について

- 本製品及び付属品は必ず使用前に点検を行ってください。
- しばらく使用しなかった本製品を使用する時は、使用前に必ず本製品が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- 接続コードプラグ差込口、専用ACアダプター差込口のほこりや汚れは、乾いた綿棒などでふき取ってください。
- 粘着パッドが古くなり乾燥した場合は、別売品をお買い求めください。
- 本製品の動作に異常を感じた場合は、修理を依頼される前に「困った時は」(P.20)を参照し、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げ販売店、またはモダンロイヤル(株)(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げいただいた販売店または、モダンロイヤル(株)までご相談ください。

●専用ニッケル水素充電電池についての注意

- 本体に添付されている専用ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。
- 専用ニッケル水素充電電池は再充電可能な電池です。
- 専用ニッケル水素充電電池が漏液した場合は、使用を中止し、電源を切り、専用ニッケル水素充電電池を交換ください。また漏液している専用ニッケル水素充電電池は、地域で定める条例に従って廃棄してください。

困った時は




本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかをご確認ください。

症状	考えられる原因	対応方法
電源が入らない	専用ニッケル水素充電電池が充電されていますか？	充電する。(P10)
	専用ニッケル水素充電電池は正しく接続されていますか？	専用ニッケル水素充電電池のコネクタを正しく接続する。(P18)
	電源ボタンを長押ししていますか？	電源ボタンを1秒以上長押しする。(P14)
	専用ACアダプターが正しく接続されていますか？	出力プラグをまっすぐ奥まで差し込む。専用ACアダプターをコンセントに差し込む。
刺激を感じない	粘着パッドが肌に密着していますか？	肌に密着して重ならないように貼り付ける。(P12~13)
	設定した時間以上使用していませんか？(タイマーの残時間が0になったあと、3分間ボタン操作を行わないと自動で電源が切れます)	使用部位をかえて再度設定する。(P15)
	外部からの雑音や妨害ノイズにより正常な動作をしないことがあります。	いったん電源(専用ニッケル水素充電電池、専用ACアダプター)を外した後、しばらくして再度電源を入れる。
刺激が弱い	接続コードプラグを正しく接続していますか？	正しく奥まで差し込む。(P11)
	出力の強さはいくつですか？	レベルを上げて適当な強さにする。(P15)
充電できない	専用ニッケル水素充電電池の故障か寿命	新しい専用ニッケル水素充電電池に交換する。(P23)
	専用ACアダプターが断線していませんか？	新しい専用ACアダプターに交換する。(P23)
粘着パッドの付きが悪い	皮膚が濡れていませんか？	皮膚の水分をよく拭く。
	粘着パッドが乾燥したり、古くなっていませんか？	新しい粘着パッドに交換する。(P23)
	ご使用される部位のお肌は清潔な状態ですか？	余分な油分などをとり、肌をきれいな状態にする。

よくあるご質問

質問	回答
粘着パッドを貼らずに使用できますか？	ご使用できません。必ず専用の粘着パッドを貼り付けた上でご使用ください。
使っているとチクチクします。	粘着パッドが乾いていたり、浮き上がることなく、しっかり貼られているか確認してください。また、出力が強すぎないか確認してください。
粘着パッドの交換時期は？	目安は20回程度です。粘着力がない時はすぐに交換してください。
濡れた肌に使っていていいですか？	水滴を取ってから使用してください。
粘着パッドを貼ってはいけない場所は？	P13の貼り付け禁止部位、またはP3の警告にある使用してはならない部位を参照してください。
どのくらいの強さで使えばいいですか？	痛みを感じない範囲でご使用ください。強すぎても意味がありません。疲労感を感じる前に使用を中止してください。
ずっと使い続けても大丈夫ですか？	部位毎に1日1回15分から30分を目安にしてください。使いすぎはよくありません。疲労感を感じる前に使用を中止してください。また、連続して同じ部位に使用しないでください。
満充電後はどのくらい使えますか？	使用時間とモード、出力レベルにより異なりますが、約1時間連続して使用できます。
しばらく使っていませんでしたが使えますか？	まずは充電確認とエラー表示（P22）が出ていないかを確認してください。粘着パッドが乾いていれば交換してください。
使用する時の姿勢は？	指定はありませんが、粘着パッドの貼りつけ面を圧迫しないようにしてください。
医用機器として治療に使えますか？	本製品は医療機器ではありません。使用しないでください。

エラー表示について

表示画面	状態
	専用ACアダプター差込口に故障した専用ACアダプターや別のACアダプターを接続すると、表示部は左図のように表示されることがあります。接続しているACアダプターをご確認ください。
	専用ACアダプターを接続せずに動作させている時、本体内部の専用ニッケル水素充電電池の容量がなくなると、左図のように表示部は電池残量表示「なし」を表示し出力を停止します。専用ACアダプターを接続して充電をしてください。最大7時間で満充電になります。満充電で約1時間連続で使用できます。(モード、出力レベルにより異なります。)
	本体に専用ACアダプターを接続し、専用ニッケル水素充電電池を充電している時、専用ニッケル水素充電電池の寿命や故障で充電できなくなった場合、左図のように表示部はエラー表示と電池残量表示「なし」を表示します。専用ニッケル水素充電電池をお買い求めいただき、本体の電池フタを開けて専用ニッケル水素充電電池を交換してください。専用ニッケル水素充電電池の充電回数は約200回が目安で、寿命に近づくとも満充電をしても使用できる時間が短くなります。



禁止 エラーが表示されたままご使用されると故障の原因となりますので絶対におやめください。



注意 このほか不明な表示が出た場合は、すぐに電源を切り使用を中止してください。

アフターサービス

※必ずお読みください。

アフターサービス

(1) 保証書(裏表紙)

保証書は所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管ください。

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理、または部材販売させていただきます。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載に内容に従って修理いたします。

(4) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

製品仕様

製品名称	パーニングシェイパー（型番：BR-5100）
本体寸法	約 W64×H140×D30mm
本体質量	約220g（専用ニッケル水素充電電池含む）
EMS出力電気定格	電気定格：AC100V 50/60Hz 100mA 本体定格：DC5.5V 520mA 内部電源：DC3.6V 1,090mA
専用ACアダプター	MODEL LTE12W-S1-J 入力 100V 50/60Hz 出力 DC5.5V 1.8A
専用ニッケル水素充電電池	形式：HRS-57 3.6V 2,000mAh
付属品	接続コード（2本） 粘着パッド（2組8枚） 専用ACアダプター（1個） 専用ニッケル水素充電電池（1個） 取扱説明書／保証書（1部） かんたん利用ガイド（1部）

消耗品について

下記の4品は消耗品になります。消耗した場合は、販売元よりお買い求めください。

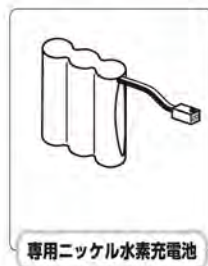

保証規定・保証書

保証規定

- 取扱説明書・かんたん利用ガイド等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
(イ)本書の提示がない場合。
(ロ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
(ニ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ヘ)一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
- 消耗品・付属品は保証対象外です。
- 個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

保証書

この保証書は、保証期間中に、お客様の正常なご使用状態（取扱説明書参照）で、万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番・品名	BR-5100 バーニングシェイパー
保証期間	お買い上げ日より1年間（本体のみ）
※お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様	フリガナ お名前 様
	〒 ご住所
	お電話番号 ()
販売店	店名・住所 印
	電話 ()
修理内容	

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

製造元

ヒロセ電機株式会社 ME事業課


〒224-8540 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-6-3 TEL:045-620-3589
<http://www.hirose-me.com/>

販売元

モダンロイヤル株式会社

〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-8 材商会館3階 TEL:03-3861-5361
<http://modernroyal.com>

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

 **0120-88-4450** 受付時間10:00~16:00（土、日、祝休み）
※12:00~13:00 はつながりません。

