


# Lifecore APICA

## LC-1000

### 取扱説明書(保証書付)

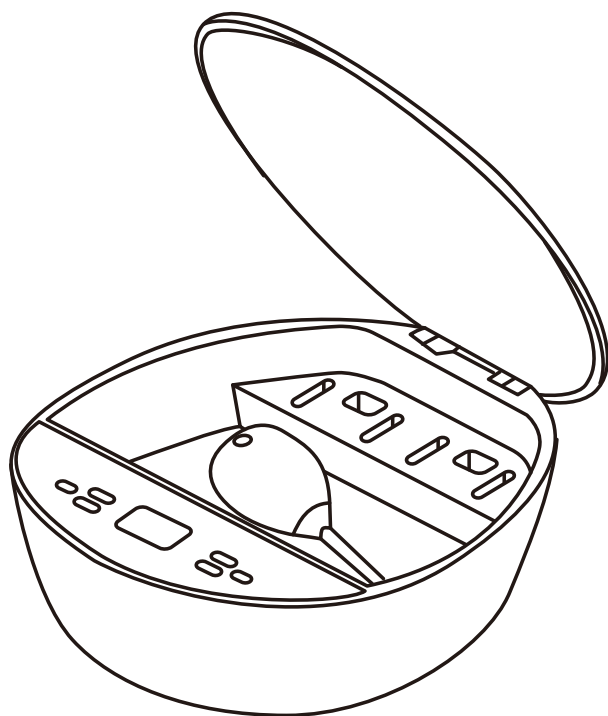

このたびは《Lifecore APICA》をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


#### エアロライフ「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。ぜひ一度ご覧ください。

<https://www.modernroyal.com/>

エアロライフ

検索

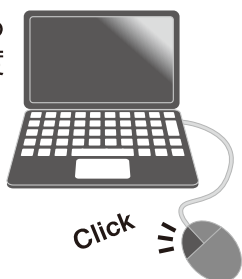



## Contents

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 安全上のご注意              | 2・3 |
| 各部位の名称               | 4   |
| コントロールパネル、ボタン、表示について | 4   |
| ご使用方法                | 5・6 |
| お手入れできる部位            | 6   |
| 脱毛ケアの周期              | 7   |
| よくある質問               | 7   |
| 商品仕様・保証規定・保証書        | 8   |


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項はご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示に区分して説明しています。

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | 「使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容」です。   |
|  <b>注意</b> | 「使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害*の発生が想定される危害・損害の内容」です。<br>*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。 |

お守りいただく内容を、次の記号で説明しています。

|   |                  |
|---|------------------|
|  | 禁止の行為であることの内容です。 |
|---|------------------|

## 安全に操作を行うために

### 警告

現在医師の治療を受けている方、下記の事項に当てはまる方はご使用をお控えください。

- 使用方法を理解されていない方
- 子供や高齢者、成長過程の方
- 妊婦、授乳期間中の方、生理中の方
- アトピー性皮膚炎、アレルギー、色素異常等、皮膚疾患のある方
- ステロイド剤を継続使用されている方
- 刺青や永久化粧部位がある方
- 皮膚ガン、もしくは皮膚ガンの治療歴のある方
- 糖尿病や腎臓病の方(皮膚損傷の原因となります)
- 光過敏症等、光に関する疾患をお持ちの方
- 心臓ペースメーカーや人工心肺等の機器を取り付けている方
- 過去3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方
- 過去3ヶ月以内に、光に強く反応するローションや薬物を使用した方
- 一週間以内ににきび治療や美白治療を受けた方
- 病院でピーリング治療やレーザー治療を行い、回復期間中の方
- 乾癬、湿疹、皮膚炎、凍傷、静脈瘤、腫れた肌への使用
- 過去1ヶ月以内に、日焼けや日焼けマシンを使用した方

### 警告

- 過去1ヶ月以内に、サンレスタニング(薬剤による色素沈着法)を行っている方
- \*このリストは全てを網羅するものではありません。使用に心配がある場合は、あらかじめ医療機関にご相談ください。

### 禁止行為

- 本商品を他の用途に使用しないでください。
- 使用前には取扱説明書に記載してある使用方法を必ず読み、適正な使用方法を守ってください。
- ハンドピース(カートリッジ)からは非常に強い光が照射されます。目の辺りや、眉毛の辺りには絶対使用しないでください。
- 本体機器やカートリッジ、電源コードに破損が発生された場合は使用しないでください。
- 水にぬれた手で使用しないでください。本体に水がかからないよう細心の注意を払ってください。  
\*バスルーム等、水まわりでの使用はできません。
- 専用のACアダプター以外は使用しないでください。感電・ショート・火災・故障の原因になります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災・故障の原因になります。

## 禁止行為

- 使用中に異常が発生したら直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。動作不良・発煙・異臭の原因になります。
- 電源コードを引っ張らないでください。故障の原因になります。
- 本体やハンドピース、カートリッジが以上に熱くなった場合は使用を控えてください。
- プラグを差し込んだままにせず、使用後は必ずコンセントから抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。高電圧で事故につながる恐れがあります。
- 本商品は洗えません。お手入れは、洗剤を使わず、乾いたタオルで拭いてください。

## 注意

### 使用してはいけない場所

- 色素沈着やホクロ、シミ、にきび、斑点等への使用。  
\*使用する際は事前に白い絆創膏等で覆ってください。
- 手術跡やアザ等への使用。
- 目の辺りや、眉毛の辺りへの使用。  
\*照射される光を直接見ないでください。
- 刺青やボディペイント等への使用。
- 髪の毛への使用。
- 乳首・乳輪・性器への使用。

## 注意

- 同じ部位への使用は約10日間に1度にとどめてください。
- 皮膚の同じ部位へ長時間使用すると、火傷や水ぶくれ等の原因になる場合があります。同じ部位には一度に繰り返し使用しないでください。
- 過去1ヶ月以内に永久脱毛を受けた部位への使用。

## 照射器使用後の注意事項


- 警告、注意事項はよく読んで理解してください。
- 本商品使用直後は、皮膚が一時的に赤くなることがあります。赤色がひどい場合は濡れたタオル等で軽く冷やしてください。  
\*氷を直接当てる等、極端な冷却は避けてください。
- 照射した部位を保湿力の高いクリームやローション等を使い、しっかり保湿してください。
- 照射した部位を24時間太陽光に当てないでください。
- 照射後2週間ほどはSPF30以上の日焼け止めを照射部位を保護してください。
- 日焼けや日焼けマシンの使用は1ヶ月以上は避けてください。

## ご使用前に


- 皮膚テスト(重要なテストです。初めて使用される場合は必ず行ってください)**  
肌の状態が正常であることを確認するテストです。手の甲や腕の内側等の肌の敏感な部位に照射して、5～10分後の皮膚の反応を確認してください。照射された部位に火傷や水疱等の異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- 初期症状**  
使用して間もなくは、照射した部位が赤くなる、熱を帯びる等の変化を感じる場合があります。このような症状は使用を重ねていく間に軽減されていきます。  
\*このような症状が出る場合は、照射部位を濡れたタオル等で冷やしながらか使用してください。
- パワーレベルの設定**  
初めて使用されるときは、皮膚テストを行った後、皮膚に負担の無いパワーレベルを設定し、段階的にレベルを上げていくようにしてください。  
\*最初から高いパワーレベルを設定しないでください。
- 剃毛**  
施術する部位の毛が長い場合は、施術の2～3日前に体毛を剃り、施術時に1～3mm程度の状態で行います。
- 照射部位の洗浄**  
照射する部位をきれいに洗ったあと、タオルなどで十分に水毛をふき取り、よく乾かしてください。  
\*これから施術しようとする部位にローションやオイル等を塗らないでください。
- 肌の冷却**  
照射部位を冷やします。  
\*肌を冷やすことにより熱の刺激を和らげます。

# 各部位の名称


## ■本体

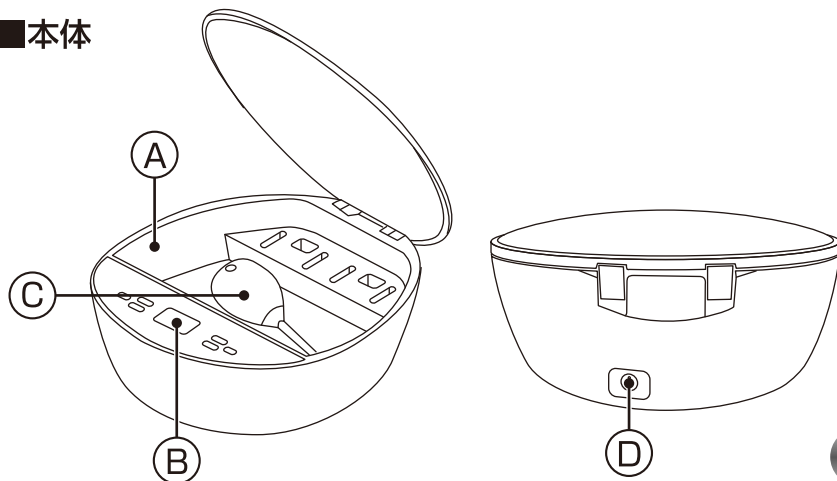

| 記号 | 部品名称      |
|----|-----------|
| A  | 本体        |
| B  | コントロールパネル |
| C  | ハンドピース    |
| D  | 電源プラグ差込口  |
| E  | 照射カートリッジ  |
| F  | 美顔カートリッジ  |
| G  | 電源コード     |

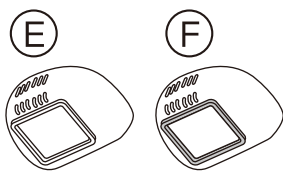

シャンパン  
ゴールド色が  
美顔カートリッジ

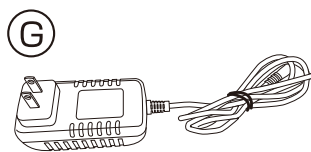


## 付属品

### ●取扱説明書 (保証書付)

※本書  
※いつでも取り出せる  
ところに大切に保管  
してください。



## ■ハンドピース

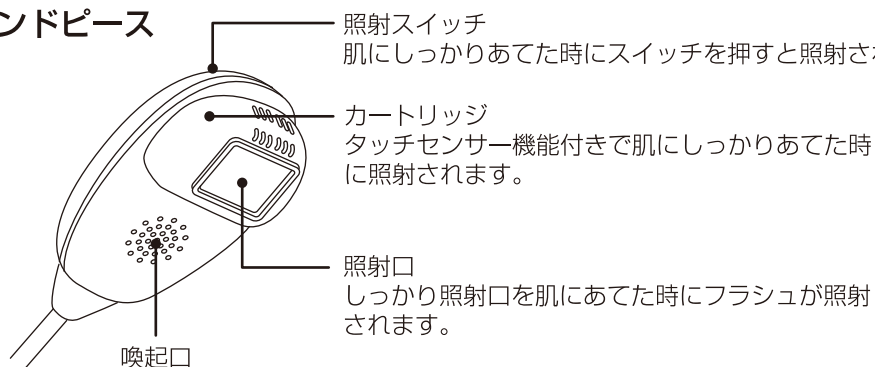


### ⚠ 注意

ハンドピースが高温になる恐れがありますので、ご使用の際は換気口を手でふさがらないでください。

# コントロールパネル、ボタン、表示について


## ■コントロールパネル

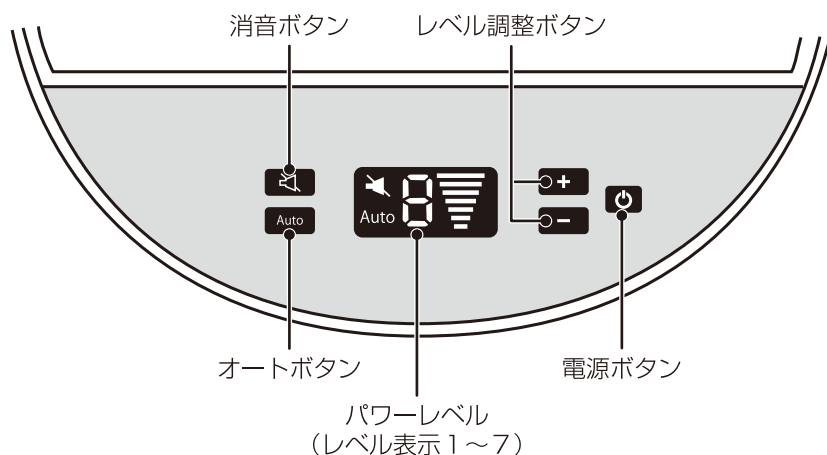

### ボタンの説明

- 電源ボタン
- レベル調整ボタン(レベル上げる)
- レベル調整ボタン(レベル下げる)
- 自動照射機能
- 消音機能

### チャージメーター

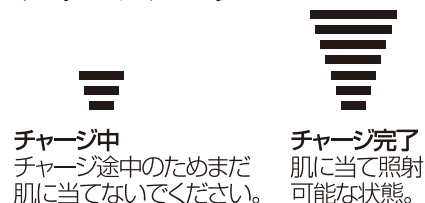

# ご使用方法

## 使用できないお肌のタイプ

肌の色が濃い場合の使用は避けてください。

濃い肌の色は光を強く吸収するため、本商品の使用で火傷を負う危険性があります。


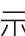
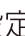
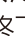
| 肌の色             | 肌のタイプ                 | 使用レベル     |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 非常に明るい、白い肌      | 日差しに敏感、肌が赤くなる、日焼けできない | 弱いレベルで使用  |
| 東洋人の明るい肌色       | 日差しに敏感、肌が赤くなり少し焼ける    | 弱めのレベルで使用 |
| 東洋人の平均的な肌色      | 日差しに敏感、肌が赤くなり薄い茶色に焼ける | 通常のレベルで使用 |
| 東洋人の濃い肌色        | 日差しに少し敏感、肌が茶色に焼ける     | 通常のレベルで使用 |
| 暗い色で簡単に日焼けしやすい肌 | 日差しに敏感ではない、濃い褐色に焼ける   | 使用不可      |
| 黒い肌             | 日差しに敏感ではない、黒く焼ける      | 使用不可      |


〈上記分類は目安です〉

\*使用前に必ず皮膚テストを行ってください。


\*痛いと感じないレベルを選択し、ご使用ください。

## 照射カートリッジ

1. ハンドピースに照射カートリッジを装着します。
  - \*照射カートリッジは照射口が白いカートリッジです。
  - \*カートリッジは奥までしっかり押し込んで装着してください。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3.  電源ボタンを押して電源を入れます。
4. レベル調整をおこないます。(7段階:最も高いパワーレベルが7です)
  - \*最初はレベル1が表示(設定)されています。  ボタンでレベルを設定します。
  - 初めてご使用される場合は、必ず皮膚テストを行ってください。レベル1から徐々にパワーを上げ、皮膚に負担のないレベルから施術を開始してください。(痛みを感じないレベル)
5. 保冷剤や固く絞ったタオル等で照射部位を冷やしてください。
6. 「チャージメーター」が全て表示され、点滅していればエネルギーがチャージされている状態です。肌に照射口を密着させ照射ボタンを押します。照射が終わったら照射口を照射部位から約20cm離しエネルギーがチャージされるのを待ち、次の照射部位に移動します。5.6を繰り返し、施術を行ってください。
7. 終了したら  電源ボタンを押して電源を切ります。
8. ACアダプターをコンセントから抜きます。
  - \*使用されていないときは、ACアダプターを必ずコンセントから抜いてください。
9. 照射口を綿棒や乾いた柔らかい布で拭いて保管してください。
  - \*絶対に水を付けて拭かないでください。

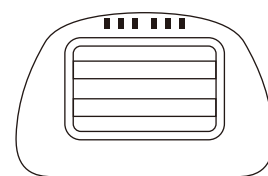

照射カートリッジ  
(照射口が白いカートリッジ)

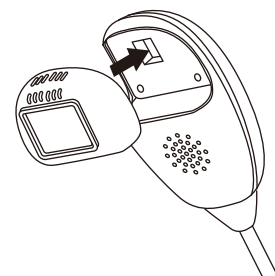

チャージメーター  
全て点灯し点滅した状態

**注意**： 施術した部位は、使用後24時間以内に強い太陽光に露出しないでください。

： 使用後48時間内は塩素消毒されたプール等の利用をお控えください。





： 使用直後は化粧品類は使用せず、施術部位をクリームやローション等で保湿してください。


： 同じ部位への照射は10日間以上開けてください。

： 照射時にハンドピースの換気口を手でふさがらないでください。ハンドピース内の温度が上昇し、故障の原因になります。


# ご使用方法

## 美顔カートリッジ

1. ハンドピースに美顔カートリッジを装着します。
  - \*美顔カートリッジは照射口がシャンパンゴールド色のカートリッジです。
  - \*照射カートリッジと間違わないよう注意してください。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3.  電源ボタンを押して電源を入れます。
4. レベル調整をおこないます。(7段階:最も高いパワーレベルが7です)
  - \*最初はレベル1が表示(設定)されています。  ボタンでレベルを設定します。初めてご使用される場合は、レベル1からお試してください。
5. 「チャージメーター」が全て表示され、点滅していればエネルギーがチャージされている状態です。お顔に照射口を密着させ照射ボタンを押します。照射が終わったら次の照射部位に移動します。
  - \*光を見ないように気を付けて照射してください。
6. 5を繰り返し、施術を行ってください。
7. 終了したら  電源ボタンを押して電源を切ります。
8. ACアダプターをコンセントから抜きます。
  - \*使用されていないときは、ACアダプターを必ずコンセントから抜いてください。
9. 照射口を綿棒や乾いた柔らかい布で拭いて保管してください。
  - \*絶対に水を付けて拭かないでください。

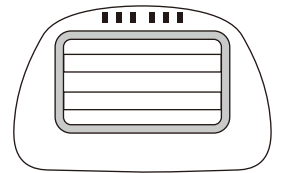

美顔カートリッジ  
(照射口がシャンパンゴールドのカートリッジ)

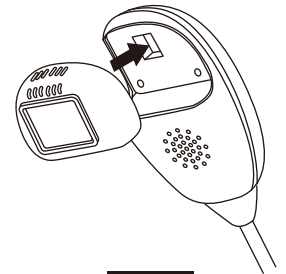


チャージメーター  
全て点灯し点滅した状態

**注意:** 美顔は毎日ご使用いただけますが、必ずメイクは落としてご使用ください。また脱毛直後に脱毛部位へのご使用はお控えください。  
: 照射時にハンドピースの換気口を手でふさがらないでください。ハンドピース内の温度が上昇し、故障の原因になります。


## AUTOモード

AUTOボタンを押すとAUTOモードに切り替わります。照射ボタンを押さなくても、照射口を肌に近づけるだけで自動照射されるモードです。もう一度押すと手動モードに切り替わります。

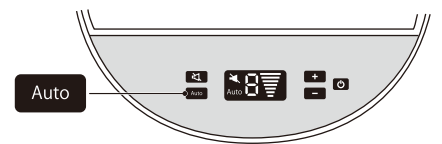

## お手入れできる部位

おすすめ  
使用部位

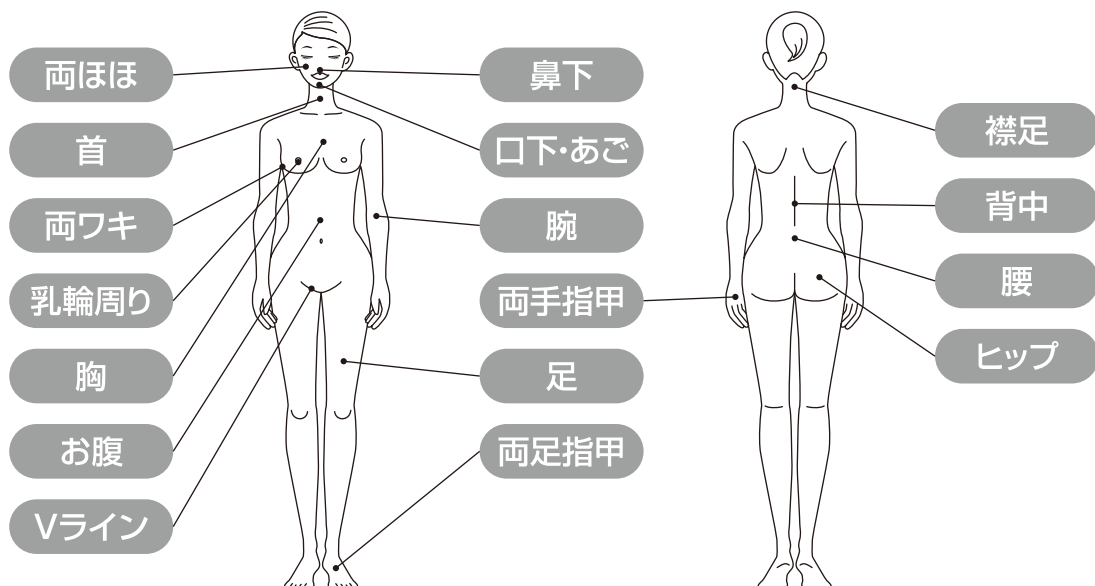

## 脱毛ケアの周期

- 最初の2ヶ月間は約10日に一回程度。
- 3ヶ月以降は1ヶ月に一回程度。  
\*同じ部位に1日2回以上照射しないでください。
- しばらく使用しなかった場合は、最初の2ヶ月と同じ頻度でケアを再開してください。

過度なご使用はお控えください。

\*上記頻度を超えてご使用される場合は、お肌の状態を確認しながらご使用ください。


\*使用頻度は守ってください。肌トラブルの原因になります。

## よくある質問

| Q                       | A  |
|-------------------------|--|
| 一度で脱毛が可能ですか？            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●IPL脱毛は継続的に使用することにより効果をあげる脱毛法です。定期的なご使用をお願いします。皮膚の状態に個人差がありますが、約10日に一度ご使用いただき、効果が実感できるまでご使用ください。<br/>*本製品は永久脱毛するものではありません。</li> </ul> |
| 施術前に剃毛するのはなぜですか？        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●剃毛してから2～3日後に使用されることを推奨していますが、これはわずかに毛が生えている状態の方が、効率的に毛根のメラニン色素に向けて照射することが出来るからです。毛抜き等を使用して毛根から抜いてしまうと効果が得られなくなります。</li> </ul>        |
| 脱毛したのに毛がのこっています。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●太い毛根などは脱毛に時間がかかります。繰り返しご使用いただくことで自然に抜け落ちたり、毛が細くなっていきますのでご安心ください。無理にワックスや脱毛テープ等で毛を除去しないでください。</li> </ul>                              |
| 脱毛カートリッジで顔に照射しても大丈夫ですか？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>●顔への照射は十分に注意を払って行ってください。目や瞼、眉毛、唇への使用は行わないようにしてください。</li> <li>●弱いレベルでご使用ください。</li> </ul>   |
| 男性も使用できますか？             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●男性も使用できますが、男性のヒゲには使用しないでください。</li> </ul>   |
| 故障したらどうしたらよいですか？        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●カスタマーサポートへご連絡ください。本商品は1年間の保証がありますので、保証期間内は無償で修理いたします。<br/>(保証書の保証規定をご覧ください)</li> </ul>   |
| 日本以外でも使用できますか？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●AC100V～240V 50/60HZの範囲内でご使用可能です。電圧が不安定な地域ではご使用できない可能性があります。日本国外での使用については一切の保証が適用外となります。</li> </ul>                                   |

点検後なお異常がある場合やご不明な点など、お気づきのことがございましたらメーカーまでお問合せください。

商品仕様

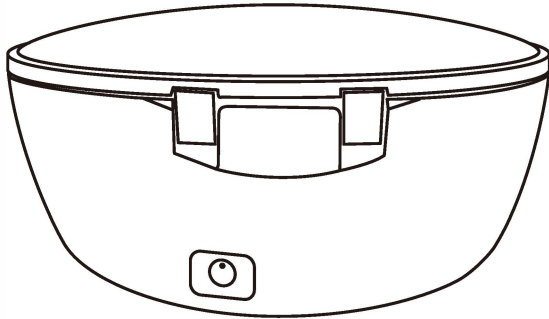

- 品名/Lifecore APICA
- 品番/LC-1 000
- 定格電圧/AC 100-240V 50-60Hz
- 定格電流/(約)48W(最大)
- コードの長さ/(約)1.2m
- 本体寸法/(約)幅22.4×奥行25.4×高さ9.8cm
- 本体重量/(約)1.3kg
- 保証期間/1年間
- 製造国/中国

☆製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

保証規定

- 1.取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ)本書の提示がない場合。
  - (ロ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
- (ニ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- (ヘ)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障及び損傷。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 5.通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
- 6.消耗品・付属品は保証対象外です。
- 7.個人情報のお取り扱いについて  
お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただきます。場合がございましたら、ご了承ください。

保証書

この保証書は、保証期間中に、お客様の正常なご使用状態(取扱説明書参照)で、万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

|        |       |                    |
|--------|-------|--------------------|
| 品名     |       | Lifecore APICA     |
| 品番     |       | LC-1000            |
| 保証期間   |       | お買い上げ日より1年間(本体)    |
| お買い上げ日 |       | 年 月 日              |
| お客様    | お名前   | フリガナ<br>-----<br>様 |
|        | ご住所   | 〒                  |
|        | 電話    | (            )     |
| 販売店    | 店名・住所 | (印)                |
|        | 電話    | (            )     |
| 修理内容   |       |                    |

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

カラダを変えていく。



AEROLIFE

お問い合わせ・発売元

**モダンロイヤル株式会社**

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 イマスオフィス馬喰町8F  
TEL.(03)5843-6281 FAX.(03)5843-6285 <https://www.modernroyal.com>

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

**0120-88-4450** 受付時間10:00~16:00(土、日、祝休み)  
\*12:00~13:00はつながりません。